

CUTTING



MOUNTING



POLISHING



HARDNESS &
MICROSCOPY



KM^{2.0}

THE NEW GENERATION OF KM MOUNTING MOULDS...

VERY SIMPLE

取り外しの容易なシリコンベースを用いており、サンプルを離型させる際に生じる失敗のリスクをなくしました。

CLEAN

このシリコンベースは完全に密閉されています。



ACCURATE

高精度リングにより、サンプルの外周径を決まった寸法で作製できます。

100%

TRANSPARENT

アクリルリングの透明度は最高を誇り、側面からサンプルの厚みを視認しやすいデザインになっています。

ECO-FRIENDLY

このシリコンベースは繰り返し使用することができ、廃棄物を軽減します。

全ての常温硬化性樹脂と合わせて使用することができます。

つまり...

革命！



販売：北川グレステック株式会社
〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27
TEL：043-301-5408 FAX：043-301-5709



THE KM^{2.0} KIT


簡単に使用でき、清潔で高精度。
KM2.0キットは50個の
アクリルリングと5個の
繰り返し使用可能なシリ
コンベースが入ってい
ます。

そのため、補充用のア
クリルリングのみでの提
供も行っています。

REF.	KM MOULDS KIT	φ
04048	50 KM rings + 5 base	25mm
04049	50 KM rings + 5 base	30mm
04050	50 KM rings + 5 base	40mm

REF.	KM MOULDS	φ
04045	50 rings	25mm
04046	50 rings	30mm
04047	50 rings	40mm

※KMモールドベースと合わせてお使い下さい。

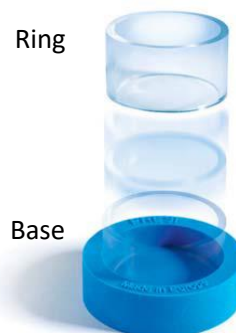

FOR USE WITH

● 不透明、もしくは透明樹脂

KM resins

KM樹脂はアクリルで
す。これらは粉と液体
を混ぜて使用します。
使用しやすく、硬化時
の発熱は70~115℃
程度です。

MA2+, 2S and IP resins

これらの樹脂は主剤と
硬化剤の2液混合で使
用します。高い透明性
を持ち、室温で固まり
ます。

IPについてはオープン
での加熱や真空脱泡
装置を効果的に使用
することもできます。

不透明樹脂		透明樹脂	
KM-U (アクリル)	短時間硬化用途に最適 です。	MA2+ (エポキシ)	エッジ観測、温度変化に 敏感な素材、ポリマー等 に有効です。
KM-V (アクリル)	短時間硬化し、収縮を減 らす目的でミネラルを含ん でいます。	IP (エポキシ)	鉱石等多鉱石素材や、 エッジ観測に有効であり、 電子部品のコーティング には最適です。
KM-EX (アクリル)	高硬度材、エッジ観測、 熱や皮膜処理の施された サンプルに適しています。	2S (ポリエス テル)	1度に多くのサンプルを埋 め込む際に有効です。
KM-EX (アクリル)	サンプル表面のレプリカの 鋳造に使用します。	KM-U (アクリル)	短時間硬化用途に最適 です。
KM-EX (アクリル)	SEMや電解研磨に適して います。	過圧時 (アクリル)	

● 真空脱泡装置 Poly'Vac

Poly'vacはMA2+やIP
樹脂ををご使用時に効
果的に含浸性を高める
真空脱泡装置です。
タッチスクリーンを搭載
し、プログラムができる
他、バキュームの強さ
や運転時間の設定が
簡単に行えます。
樹脂のディスプレイ
を搭載し、運転中に内
部に樹脂を注入するこ
とも可能です。

セット内容

- ・保護シート(50枚)
- ・パイプ(50本)
- ・プラスチックノズル(50本)

アクセサリ

Ref. 53605

- ・保護シート 50枚

Ref. 53606

パイプ及びプラスチックノズル 50本セット



Ref. 53600

PRESI IS ALSO...

CUTTING



MOUNTING



POLISHING

